

## [NR-19470 土拉弗朗西斯菌亚种.土拉菌,菌株SCHUS4, Gateway? 克隆集,在大肠杆菌中重组,板13\(克隆\)](#)

[下载为PDF](#)

- 12 次围观

产品图片



产品英文名称

[NR-19470\\_ Francisella tularensis subsp. tularensis, Strain SCHU S4, Gateway? Clone Set, Recombinant in Escherichia coli, Plate 13\(Clones\)](#)

产品别名

[NR-19470\\_ Francisella tularensis subsp. tularensis, Strain SCHU S4, Gateway? Clone Set, Recombinant in Escherichia coli, Plate 13\(Clones\)](#)

[NR-19470 土拉弗朗西斯菌亚种.土拉菌, 菌株 SCHU S4, Gateway? 克隆集, 在大肠杆菌中重组, 板 13 \(克隆\)](#)

货号/SKU

NR-19470

货号/规格

EA

库存与交货期

3-8周

人民币价格

14000

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

## 试剂海关审批

A/B级风险物质只能直接使用者购买并持有实验室有效资质，其它询客服确认

国外采购

支持/部分限制一年内购买数量

厂牌

BEI Resources(ATCC)

品牌

[BEI Resources](#)

产品基础信息

生物安全等级建议分类：美国、1

产品描述信息

NR-19470?? Francisella tularensis subsp. tularensis, Strain SCHU S4, Gateway? Clone Set, Recombinant in Escherichia coli, Plate 13(Clones)|Francisella tularensis subsp. tularensis|Francisella tularensis subsp. tularensis, Strain SCHU S4, Gateway? Clone Set, Recombinant in Escherichia coli, Plate 13|-80°C or colder|Pathogen Functional Genomics Resource Center at the J. Craig Venter Institute Acknowledgment for publications should read "The following reagent was obtained through BEI Resources, NIAID, NIH: Francisella tularensis subsp. tularensis, Strain SCHU S4, Gateway? Clone Set, Recombinant in Escherichia coli, Plate 13, NR-19470."|Quantity limit per order for this item is 1. This item can be ordered twice a year. Orders over this limit will be sent to NIAID for approval before shipment.

The *Francisella tularensis* (*F. tularensis*) subsp. *tularensis*, strain SCHU S4, Gateway? clone set consists of 19 plates which contain 1693 sequence validated clones from *F. tularensis* subsp. *tularensis*, strain SCHU S4 cloned in *Escherichia coli* (*E. coli*) DH10B-T1 cells. Each open reading frame was constructed in vector [pDONR?221](#) (Invitrogen?) with a native start codon and no stop codon. The sequence was validated by full length sequencing of each clone with greater than 1X coverage and a mutation rate of less than 0.2%.

Information related to the use of Gateway? Clones can be obtained from [Invitrogen?](#) Recombination was facilitated through an *attB* substrate (*attB*-PCR product or a linearized *attB* expression clone) with an *attP* substrate (pDONR?221) to create an *attL*-containing entry clone. The entry clone contains recombinational cloning sites, *attL1* and *attL2* to facilitate gene transfer into a destination vector, M13 forward and reverse priming sites for sequencing and a kanamycin resistance gene for selection. Please refer to the Invitrogen? [Gateway? Technology Manual](#) for additional details.

Each inoculated well of the 96-well plate contains approximately 60 ?L of *E. coli* culture (strain DH10B-T1) in Luria Bertani (LB) Broth containing 50 ?g/mL kanamycin supplemented with 15% glycerol.

**Note: Production in the 96-well format has increased risk of cross-contamination between adjacent wells. Individual clones should be purified (e.g. single colony isolation and purification using good microbiological practices) and sequence-verified prior to use. BEI Resources cannot confirm or validate any clone not identified on the plate information table found on the Product Sheet.**

主要内容

此项目的每个订单数量限制为1.此商品每年可订购两次.在发货前将在此限制的订单发送到NIAID进行批准. Francisella Tularensis (F. Tularensis) 子公司. Tularensis, 菌株Schu S4, 网关?克隆组由19个板组成, 其中包含来自 f的 1693个序列验证的克隆. tularensis 子公司. Tularensis, 菌株Schu S4克隆在大肠杆菌 (大肠杆菌) (大肠杆菌) / dh10b-t1细胞中.每个开放阅读框架是在Vector pdonr?221 (Invitrogen?) 中使用本机起始密码子和没有阻止密码子.通过大于1x覆盖率的每个克隆的全长测序验证序列, 突变率小于0.2%. 与使用网关?克隆有关的信息从 Invitrogen ?.通过 att b底板 ( att b-pCR产物或线性化的 att b表达克隆) 促进重组, 用 att P衬底 (PDONR?221) 以产生含有含有ATT L的入口克隆.进入克隆含有重组克隆位点, att l1和 att L2, 以促进基因转移到目的载体中, 用于测序和卡那霉素抗性基因的目的载体, M13向前和逆向引发位点选择.请参阅Invitrogen?网关?技术手册更多详情. 96孔板的每个接种孔含有大约60µl的 e. Coli 培养 (菌株DH10B-T1) 在含有50µg/ mL卡那霉素的LURIA Bertani (LB) 肉汤中补充有15%甘油的肉类. 注意: 生产96孔格式增加了相邻井之间的交叉污染的风险.应纯化各个克隆 (例如, 使用良好的微生物实践的单菌落分离和纯化) 并在使用前进行序列验证. Bei Resources无法确认或验证在产品表上找到的板信息表上未识别的任何克隆.

厂牌介绍

BEI Resources 由美国国家过敏和传染病研究所 ( [NIAID](#) ) 成立, 旨在为研究 [A、B 和 C 类](#) 优先病原体、[新兴传染病](#) 病原体、非病原微生物和其他相关微生物材料提供试剂、工具和信息到研究界. BEI Resources 获取、验证和生产科学家进行基础研究和开发改进的诊断测试、疫苗和疗法所需的试剂. 通过将这些功能集中在 BEI Resources 中, 可以监控科学界对这些材料的访问和使用, 并确保试剂的质量控制.

除了为传染病界提供材料外，BEI Resources 还鼓励和支持研究人员和机构的材料存放。[使用 BEI Resources 存放材料](#)对研究人员和研究社区有许多优势，包括安全存储、社区访问和分发；同时保护存款人的知识产权。只要有需要，BEI 资源库将作为研究人员的资源进行维护。您在 BEI Resources 的存款是一项有助于未来研究的长期投资。

BEI Resources 自 2003 年起由[美国典型培养物保藏中心 \(ATCC\) 根据合同管理](#)。2016 年 5 月，ATCC 获得了一份为期七年的继续管理 BEI Resources 的合同。合同范围已扩大到更全面的研究目录材料，包括由其他政府支持的研究项目存放的材料，将提供给生物防御和新兴传染病科学界。真菌、寄生虫、载体和其他相关材料已添加到现有的细菌、病毒和毒素试剂中，涵盖 NIAID A、B 和 C 类优先病原体 and NIAID 指定的新发传染病病原体和生物。

品牌标识

beii RESOURCES

SUPPORTING INFECTIOUS DISEASE RESEARCH

产品关键词

[BEI Resources 生物材料代理进口报关公司](#)

[如何购买可以直接从 BEI Resources 购买菌种吗](#)

[BEI Resources 生物材料库中国官网是？](#)

[BEI Resources 生物材料库中国代理](#)

[BEI Resources 怎么查询菌株抗体细胞](#)

[NR-19470 土拉弗朗西斯菌亚种.土拉菌](#)

[菌株 SCHU S4](#)

[Gateway? 克隆集](#)

[在大肠杆菌中重组](#)

[板 13\(克隆\)，NR-1\\_Vaccinia virus](#)

[Modified Vaccinia Ankara \(MVA\)\(Viruses\)](#)

[Modified Vaccinia Ankara \(MVA\)，生物试剂报关 BEI Resources](#)

[NIAID](#)

[NIH](#)

[NIAID 全称是美国国家过敏和传染病研究所](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求


报价要求详细描述

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

马上发我报价

手机扫描二维码阅读本页

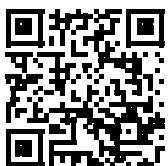

## 可能感兴趣的内容

[NR-18541 结核分枝杆菌, CDC1551 Transposon Mutant 2501 \(MT1849.1, Rv\\*\) \(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[4PD 在体内 MDSC / Mφ 转染试剂盒中](#)

2021-12-21

[NR-43232 来自成年雄性和雌性日本血吸虫, 菲律宾株的总 RNA \(核酸\)](#)

2022-04-01

[白蚁巢来源链霉菌 T12 的分离鉴定及其抗菌活性代谢产物](#)

2021-10-31

[叠氮虫, 25 毫克](#)

2021-12-21

[NR-55300 单克隆抗 SARS 相关冠状病毒 2 刺突糖蛋白受体结合域 \(RBD\), 克隆 2TP2C2 \(体外生产\) \(单克隆抗体\)](#)

2022-04-01

[铅锆钛酸盐 / PZT \(O5PbTiZr\) 溅射靶材, 纯度: 99.9%, Size: 4", 厚: 0.250"](#)

2024-01-21

[NR-48337 金黄色葡萄球菌亚种, 金黄色葡萄球菌, JE2, 转座子突变体 NE1795 \(SAUSA300\\_0839\) \(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[2025 03 11 HackerNews](#)

2025-03-09

[NR-19799 产肠毒素大肠杆菌表达克隆集, 在大肠杆菌中重组, 板 10 \(克隆\)](#)

2022-04-01

[NR-51392 人类星状病毒 5 型, 牛津 \(病毒\)](#)

2022-04-01

[FASE 亮文解读: 不同冠层阻力方法对夏玉米田蒸散发及土壤水分影响的分析](#)

2024-12-08

[抗 P53 \[PAB240\] 抗体](#)

2021-12-21

[NR-56481 SARS 相关冠状病毒 2, 分离株 hCoV-19/USA/GA-EHC-2811C/2021 \(B.1.1.529 谱系: Omicron 变体\) \(病毒\)](#)

2022-04-01

[Ti2CMXene 粉末](#)

2024-01-21

[动物没耳朵前就会“说话”](#)

2022-06-17

[NR-41927 肺炎克雷伯菌, BIDMC11 \(细菌\)](#)

2022-04-01

[中科院指定 DC184 PDMS 模块胶 184 光学胶 1.1KG](#)

2021-12-02

[抗肺炎球菌血清型 3 单克隆抗体 \[克隆 15-103FC11IH5\] 21/270](#)

2024-05-19

[基于两阶段分层抽样的近似聚合查询方法](#)

2022-06-17