

高磁性好用的磁力架0.2 mL PCR条带磁分离架/带冷却模块

[下载为PDF](#)

- 15 次围观

产品图片



产品英文名称

[0.2 mL PCR Strip Magnetic Separator / Chiller Block](#)

产品别名

[PCR样品提取磁力架、96孔磁力板、384孔磁力板](#)

货号/SKU

MSB08

货号/规格

个

库存与交货期

1-2周

人民币价格

3775

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

支持

国外采购

支持

厂牌

Permagen Labware, Ltd

品牌

[Permagen](#)

产品基础信息

0.2 mL PCR Strip Separators, Cooling/ Heating Blocks, Magnetic Separation Racks

产品描述信息

Features

Optimized for PCR applications

Rubber feel to help prevent slippage

Strong, stable design

Works with any beads

Multichannel pipetting capable

Specifications

Size: 75mm Long x 35mm Tall x 37.5mm

Weight: 200g

Magnets: 50 GMO NdFeB

Country of origin: USA

For Research Use Only

Applications

DNA/RNA purification

PCR cleanup

ChIP assays

0.2 mL PCR Strip Magnetic Separator / Chiller Block

The Permagen 0.2 mL magnetic rack/ chiller block was designed for use 8 strip PCR tubes or individual tubes. Great alternative to our MSR812 rack if you work mostly with 8 samples or less.

- Will accommodate most 0.2 mL PCR strips with or without caps
- Can also be used with Individual 0.2 mL PCR tubes
- Compatible with most 8 tube, 0.2 mL PCR strips
- Angled tube holes allow strips to come close to magnets
- Each tube has its own individual strong neodymium magnet
- Back row of holes are contoured to match PCR tubes for maximum temperature transfer
- Back row is non magnetic and can be used for safely standing tubes up for sample prep
- Solid aluminum design for durability and maximum chilling capability
- *Made in the USA*

Not the product you were looking for? Try our product selection guide for help [Product Selection Guide](#)

Volume discounts available, please call or email for price

产品安全信息

特征 针对PCR应用进行了优化 橡胶感觉有助于防止滑动 强大，稳定的设计 适用于任何珠子 多通道移液能力 规格尺寸：75毫米长x 35mm高x 37.5mm 重量：200g. 磁铁：50 Gmo ndfeb 原产国：美国 仅限研究使用 应用程序 DNA / RNA纯化 PCR清理 芯片测定

主要内容

0.2ml PCR条带磁分离架/冷却器块渗透器0.2毫升磁力架/冷却器块设计用于使用8条带PCR管或单个管。如果您主要使用8个样品或更少的样品或更少工作的替代品。适应大多数0.2 ml的PCR条带或没有Capscan的PCR条也可与大多数8管的单独的0.2ml PCR管数留，0.2ml PCR STRIPS ANGLED管孔允许条带靠近磁铁管有自己的个体强钕磁性恢复孔的轮廓匹配以匹配PCR管，用于zui大温度转移行是非磁性的，可用于安全站起来用于样品制剂铝设计，用于耐久性和zui大冷却能力制剂您正在寻找的产品？尝试或产品选择指南有助于产品选择指南，请致电或发送电子邮件

产品说明书或彩页

[Permagen磁力架用户选择指南](#)

厂牌介绍

Permagen Labware, LTD. 是创新实验室器具解决方案的供应商。专门从事分离DNA / RNA的液体处理设备。Permagen专注于提供具有性能，耐用性和重复能力的设计和制造产品。Permagen Labware与液体处理机器人，科学家等原始设备制造商（OEM）密切合作，为您的自动化或手动需求提供卓越的产品。专业：•定制工程，包括CAD设计 •修改我们当前的产品以适应您的应用程序或协议 •直接产品更换（我们可以制造您当前的产品） •典型塑料铝合金磁板升级后，最有可能弯曲，产生不稳定的结果。升级包括更严格的容差和平直度以替代您的当前产品，而无需重新编写协议等，从而产生一致的结果。也可以根据您的需要升级到我们强大的钕铁硼磁体。 •定制磁分离架 •加热/冷却模块 •液体处理机器人产品，如移液平台，液体分配槽，平板巢等。Permagen 的团队从事磁分离产品的制造已有近15年的历史。现在，Permagen Labware 很高兴将我们自己的卓越液体处理设备推向市场。我们过去的经验使我们能够从其他公司已经停止的地方开始。这意味着您将获得相同的成熟技术和更高质量的产品。Permagen 已将 DNA 分离产品提升到一个新的水平，使用更高质量的材料和更严格的公差，这使我们能够为客户提供性能更好的产品。所有 Permagen 产品都自豪地在美国制造，设计用于多年无故障使用。我们 100% 专注于以合理的价格为客户提供高质量的产品。

品牌标识



产品关键词

- [Permagen磁力架](#)
- [磁力架图片及价格](#)
- [生物磁珠纯化磁力架](#)
- [磁力架厂家](#)
- [强磁磁力架](#)
- [磁力架dynamag 2](#)
- [磁力架life](#)
- [钕铁硼磁力架](#)
- [96孔浅孔板用磁力架](#)
- [PCR板磁力架](#)
- [磁力分离架 thermo](#)
- [96孔磁力架](#)
- [384孔磁力架](#)

一键获取大包装优惠报价

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】


请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页

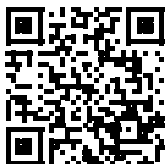

可能感兴趣的内容

[Gong TJ, Xiao B, Liu ZJ, Wan J, Xu J, Luo DF, Fu Y, Liu, L.* Rhodium-catalyzed selective C-H activation/olefination of phenol carbamates. ORGANIC LETTERS 13, 3235-3237, 2011.](#)

2021-10-31

[NR-42844 肠沙门氏菌亚种.enterica,14028s\(SerovarTyphimurium\)Single-GeneDeletionMutantLibrary,PlateSGD_067/068_Kan\(MutantBacteria\)](#)

2022-04-01

[从异花授粉到自花授粉，花的形态经历了什么](#)

2020-08-04

[人乳头瘤病毒\[HPV\]52型DNA\[第一批国际标准\]14/262](#)

2024-05-19

[Cy7.5叠氮化物,100μl,10 mm在DMSO中](#)

2021-12-21

[NR-50370 来自流产布鲁氏菌的基因组DNA,菌株544\(核酸\)](#)

2022-04-01

[NR-46624金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、USA300JE2、转座子突变体SAUSA300_2285\(NE81\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[抗木聚糖5 \[CCRC-M145,20B5.G7.B4\]抗体\(上清液\)](#)

2021-12-21

[北极熊新亚种：捕猎不需要海冰](#)

2022-06-17

[大鼠\(Sprague-Dawley\) - 睾丸 - 组织学切片](#)

2021-12-21

[道康宁184灌封胶 PDMS聚二甲基硅氧烷 光学胶高透明500G](#)

2021-12-02

[NR-36705甲型流感病毒,A/猪/俄亥俄/09SW73E/2009\(H3N2\)\(病毒\)](#)

2022-04-01

[NR-2543来自巨大芽孢杆菌的基因组DNA,福特菌株19\(Gibson1060\)\(核酸\)](#)

2022-03-31

[大规模MIMO通信中基于Jacobi预迭代的改进Gauss-Seide算法](#)

2021-10-31

[伊蚊3HKT基因RNAi载体构建及口服对伊蚊的致死作用](#)

2021-10-31

[基于全基因组测序的法医单核苷酸多态性系谱推断研究](#)

2023-11-22

[重组抗体,抗VSV-N \[10G4\],小鼠,IGMK](#)

2021-12-21

[HM-895Veillonellasp.,AS16\(细菌\)](#)

2022-04-01

[形状记忆聚合物NGS5520](#)

2024-01-21

[科研人员揭示硝酸盐维持机体稳态机制](#)

2024-02-29