

## 高磁性好用的磁力架96孔环形磁分离板

[下载为PDF](#)

- 4 次围观

产品图片



产品英文名称

[96-Well Ring Magnet Plate](#)

产品别名

[PCR样品提取磁力架、96孔磁力板、384孔磁力板](#)

货号/SKU

S380-350ul

货号/规格

个

库存与交货期

1-2周

人民币价格

6737

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

支持

国外采购

支持

厂牌

Permagen Labware, Ltd

品牌

[Permagen](#)

产品基础信息

96- Well Magnet Plates, Magnetic Separation Plates

产品描述信息

Features

Compatible with most 96-well microplates

Super strong magnets for fast separations

PCR volumes 50- 200µL

Deep well max volumes 2mL

SBS footprint to fit most liquid handlers

Specifications

Size = 127.75mm x 85.47mm x 14mm

Weight = 427g

Magnets = 50 MGO NdFeB

Country of origin = USA

For Research Use Only

Volume

SKU: S380 - Up to 350 µL, SKU: S480 - Up to 1 mL, SKU: S500 - Up to 2 mL

## **96-Well Ring Magnet Plate S500, S480, and S380**

The Permagen 96-well ring magnet plate was designed for use in manual and automation applications. The magnets will form beads into approximately a 4mm ring leaving a clean area near the bottom of the wells for easy removal. If you use flat bottom microplates we recommend our U500 magnet plate which will keep the microplate in place. The S500 uses our strongest magnets, we have other variations if this does not meet your needs

- Available in three magnet strengths to meet your protocol needs (select volume above add to cart button)
- Compatible with most round bottom, v-bottom, and PCR Plates
- Solid Aluminum Design for consistent results
- SBS compliant footprint
- SKU: S500 Contains our strongest magnets for larger volume separations or faster lower volume separations
- Maximum working volume: S500 = 2ml/ S480 = 1ml/ S380 = 350 µL
- *Made in the USA*

Please contact us for volume discounts.

产品安全信息

特征 与大多数96孔微孔板兼容 超强磁铁，用于快速分离 PCR体积50-200µL 深井最大卷2ml SBS足迹适合大多数液体处理器 规格 尺寸= 127.75mm x 85.47mm x 14mm 重量= 427g 磁铁= 50 MgO NDFEB 原产国=美国 仅限研究使用 体积 SKU: S380 & #8211;高达350µl, SKU: S480 - 高达1毫升, SKU: S500 - 最多2毫升

主要内容

96孔环磁板S500, S480和S380 permagen 96孔环磁板设计用于手动和自动化应用。磁铁将生物磁珠形成大约4毫米的环，留下井下的清洁区域，以便容易地移除。如果使用扁平底部微孔板，我们建议我们的U500磁铁板将使微孔板保持在适当位置。S500使用我们zui强大的磁铁，如果这不符合您的三种磁铁强度，我们还有其他变体，以满足您的协议需求（选择上面的卷添加到购物车按钮），与大多数圆底，V-底部和PCR Platesolid铝兼容符合结果的设计兼容脚印：S500包含我们zui强的磁铁，用于更大的体积分离或更快的较低批量分离Maximum工作体积：S500 = 2ml /

S480 = 1ml / S380 = 350µl在USPLEASE中制造的USPLAY, 请联系我们进行批量折扣。

产品说明书或彩页

[Permagen磁力架用户选择指南](#)

厂牌介绍

Permagen Labware, LTD. 是创新实验室器具解决方案的供应商。专门从事分离DNA / RNA的液体处理设备。Permagen专注于提供具有性能, 耐用性和重复能力的设计和制造产品。Permagen Labware与液体处理机器人, 科学家等原始设备制造商 (OEM) 密切合作, 为您的自动化或手动需求提供卓越的产品。专业: •定制工程, 包括CAD设计 •修改我们当前的产品以适应您的应用程序或协议 •直接产品更换 (我们可以制造您当前的产品) •典型塑料铝合金隔板升级后, 最有可能弯曲, 产生不稳定的结果。升级包括更严格的容差和平直度以替代您的当前产品, 而无需重新编写协议等, 从而产生一致的结果。也可以根据您的需要升级到我们强大的钕铁硼磁体。•定制磁分离架 •加热/冷却模块 •液体处理机器人产品, 如移液平台, 液体分配槽, 平板巢等。Permagen 的团队从事磁分离产品的制造已有近15年的历史。现在, Permagen Labware 很高兴将我们自己的卓越液体处理设备推向市场。我们过去的经验使我们能够从其他公司已经停止的地方开始。这意味着您将获得相同的成熟技术和更高质量的产品。Permagen 已将 DNA 分离产品提升到一个新的水平, 使用更高质量的材料和更严格的公差, 这使我们能够为客户提供性能更好的产品。所有 Permagen 产品都自豪地在美国制造, 设计用于多年无故障使用。我们 100% 专注于以合理的价格为客户提供高质量的产品。

品牌标识



产品关键词

[Permagen磁力架](#)

[磁力架图片及价格](#)

[生物磁珠纯化磁力架](#)

[磁力架厂家](#)

[强磁磁力架](#)

[磁力架dynamag 2](#)

[磁力架life](#)

[钕铁硼磁力架](#)

[96孔浅孔板用磁力架](#)

[PCR板磁力架](#)

[磁力分离架 thermo](#)

[96孔磁力架](#)

[384孔磁力板](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票; 尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA, 特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格, 默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家, 独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述


【如有请填写;若无留空即可】按10KG、25L大量采购的时候, 是否可

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

马上发我报价

手机扫描二维码阅读本页

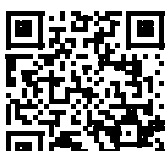

## 可能感兴趣的内容

[锰\(Mn\)溅射靶材,纯度:99.95%,Size:6",厚:0.250"](#)

2024-01-21

[NR-3178乙型流感病毒,B/Lee/1940\(病毒\)](#)

2022-03-31

[NR-46566金黄色葡萄球菌亚种,金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE23\(SAUSA300\\_0740\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-15461结核分枝杆菌,CDC1551转座子突变体2376\(MT3894,Rv3786c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-18212结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1726\(MT1363.1、Rv1322\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[微流控玻璃芯片/玻璃芯片PEEK转接头/PDMS芯片加工键合/SU8模具](#)

2021-12-02

[HM-139D来自金黄色葡萄球菌的基因组DNA,菌株TCH70\(MRSA\)\(核酸\)](#)

2022-04-01

[双重压力让土壤微生物“崩溃”](#)

2020-08-04

[NR-18725\\_结核分枝杆菌,CDC1551TransposonMutant2904\(MT3614,Rv3510c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[镧铈镉酸盐\(La0.7Sr0.3MnO3\)溅射靶材,纯度:99.9%,Size:1",厚:0.250"](#)

2024-01-21

[NR-3604甲型流感病毒,KilbourneF46: A/Texas/1/1977\(HA\)xA/PuertoRico/8/1934\(NA\)\(H3N1\)\(病毒\)](#)

2022-03-31

[NR-18537结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体2488\(MT2754、Rv2680\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[七鳃鳗 GnRH-II,延长\(PGLU-HIS-TRP-SER-HIN-GLY-TRP-PHE-PHE-PHE-PHE-PHE-PLYSS\),250ug](#)

2021-12-21

[NR-44124\\_AmblyommaamericanumNymph\(矢量\)](#)

2022-04-01

[道康宁DC184硅橡胶水SYLGARD-184道康宁灌封胶PDMS聚二甲基硅氧烷](#)

2021-12-02

[NR-18194结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1696\(MT0934、Rv0910\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[HM-92普氏菌,F0319\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-50555单克隆抗甲型流感病毒H3血凝素\(HA\)茎域,克隆FF1.H6.H6\(AX-LAH3\)\(体外生产\)\(单克隆抗体\)](#)

2022-04-01

[主混合25次实验](#)

2021-12-21

[NR-19635鼠疫耶尔森菌,KIM菌株,Gateway?克隆集,在大肠杆菌中重组,板39\(克隆\)](#)

2022-04-01