


WT-Apoca-TAGRFP生物传感器蛋白

[下载为PDF](#)

- 7 次围观

产品图片

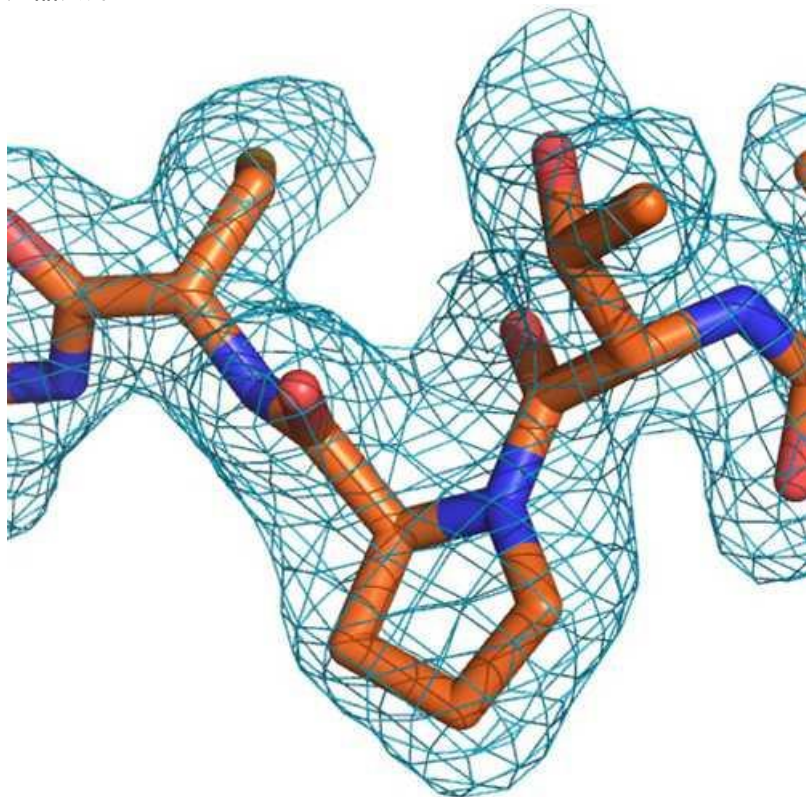

产品英文名称

[WT-apoCA-tagRFP Biosensor Protein](#)

产品别名

[Kerafast独特的生物试剂](#)

货号/SKU

KPG006

货号/规格

100ug

库存与交货期

1-2周

人民币价格

10000

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

使用人负责A/B风险申请资质

国外采购

支持/部分需签MTA

厂牌

Kerafast, Inc.

品牌

[Kerafast®](#)

产品基础信息

The sensor has extremely high affinity for Zn^{2+} ($KD = 2.19 + 0.7pM$), and Cu^{2+} ($KD < 0.1 pM$) as well as Hg^{2+} ; by comparison Cd^{2+} , Co^{2+} , and Ni^{2+} have affinities mostly in the nanomolar range. The sensor should only be dissolved in metal-free buffers (or our metal ion buffers with known free zinc concentration), and should not touch metal or glass; most plastic (including natural pipette tips) is

satisfactory in this regard. Ca²⁺ and Mg²⁺ do not interfere at concentrations as high as 10 mM and 50 mM, respectively. For further details see our Resources on the Poekagama Technologies web site or our review: Bozym, et al., 2008 PMID 19152866.

产品描述信息

Product Type:	Protein
Name:	wt-apoCA-tagRFP biosensor protein
Extinction Coefficient:	$\epsilon_{555\text{ nm}} = 100,001$
Molecular Weight:	60,000 Da
Variant MPN:	T-0005
Format:	Solution in pH 7.5 buffer
Purity:	>95%
Tested Applications:	Extracellular measurement and imaging of free zinc ion at picomolar levels Fluorescent-labeled zinc free apoprotein; fluorescent label excitation maximum 555 nm, preferred emission wavelength 612 nm
Comments:	
Storage:	+4C
Shipped:	Cold packs

产品安全信息

B. J. McCranor, R. A. Bozym, M. Vitolo, C. A. Fierke, L. Bambrick, B. Polster, G. Fiskum, and R. B. Thompson, "Quantitative imaging of mitochondrial and cytosolic free zinc levels in an in vitro model of ischemia/reperfusion" *Journal of Bioenergetics and Biomembranes* 44(2) 253 - 263 (2012). DOI: 10.1007/s10863-012-9427-2 PMID 22430627 NIHMS382081D. Wang, T. K. Hurst, R. B. Thompson, and C. A. Fierke "Genetically Encoded Ratiometric Biosensors to Measure Intracellular Exchangeable Zinc in *Escherichia coli*". *Biomed. Opt.* 16(8) 087011/1-11 (2011) [DOI: 10.1117/1.3613926. PMID: 21895338 PMCID: PMC3166341. R.A. Bozym, T. Hurst, N. Westerberg, A.V. Stoddard, C.A. Fierke, C.J. Frederickson, R.B. Thompson, "Determination of zinc using carbonic anhydrase-based fluorescence biosensors," in *Methods in Enzymology: Fluorescence Spectroscopy Vol. 450* (L. Brand and M.L. Johnson, editors) New York: Elsevier, pp 279-301 (2008). PMID 19152866. R. A. Bozym, A. K. Stoddard, C. A. Fierke, and R. B. Thompson, "Measuring picomolar exchangeable zinc in PC-12 cells using a ratiometric fluorescence biosensor," *ACS Chemical Biology* 1(2) 103 - 111 (2006) PMID: 17163650. R. B. Thompson, M. L. Cramer, R. Bozym, and C. A. Fierke, "Excitation ratiometric fluorescent biosensor for zinc ion at picomolar levels," *J. Biomed. Optics* 7 (4), 555 - 506 (2002). PMID 1242112 If you publish research with this product, please let us know so we can cite your paper.

主要内容

WT-Apoca-TAGRFP生物传感器蛋白是一种基于荧光的生物传感器，具有最高敏感性的细胞外使用。用4-(二甲基氨基苯基)苯并噻唑基磺酰胺，可以测量浓度在PICOMOLAR范围内的水溶液中的游离锌（PMID 22430627, PMID 19152866, PMID: 17163650）。蛋白质是野生型吸气酸酐酶的融合蛋白与TAGRFP一起。它是激励比率传感器的一个例子，其使得精确，可再现的校准简单，最小化大多数伪像：原理如下所示。当锌未束时，4-(二甲基氨基苯基)苯并噻唑基磺酰胺在610nm（或其他合适的波长）下在365nm激发时不结合和发射。然而，当锌与碳酸酐酶活性位点结合时，磺酰胺现在可以与量子产率大幅增加，并有效地将其能量有效地转移到附着的TAGRFP，然后在红色中发出。在555 nm下直接振兴TAGRFP使一个人能够将UV激励的Zn绑定形式归一化，以防止TAGRFP作为激励比率。

厂牌介绍

关于Kerafast Inc.

Kerafast 是一家位于波士顿的试剂公司，其主要使命是为QuanQiu科学界提供易于使用的独特实验室研究工具。我们的产品组合包括细胞系、抗体、小分子、染料等，其中许多在其他地方无法获得。自 2011 年成立以来，来自[全球 190 多个机构](#)的研究人员通过我们的在线平台提供了他们的创新试剂，无需通过传统的材料转让协议流程即可快速获取材料。

我们处理提供实验室的所有销售和运输物流，并从每次销售中返还丰厚的特许权使用费。因此，我们帮助提供实验室节省时间和资源，同时为进一步研究提供额外资金。采购科学家可以更轻松地发现和获取其他地方通常无法获得的独特试剂，同时还可以资助其他研究人员的工作。这创建了一个QuanQiu科学家社区，他们贡献和获取 *Reagent for the Greater Good*，以加速他们自己的研究以及整体科学进步。

2018 年，Kerafast 与 [Absolute Antibody](#) 合并，后者是一家总部位于英国的公司，其愿景是为所有研究人员提供重组抗体技术。此次合并将两家公司聚集在一起，共同致力于改善科学界可用的研究工具的选择。

品牌标识



产品关键词

[kerafast抗体ED2003](#)
[kerafast 抗体](#)
[kerafast国内代理商](#)
[kerafast](#)
[kerafast 代理](#)
[kerafast细胞](#)
[kerafast抗体代理](#)
[kerafast代理商](#)
[kerafast品牌](#)
[kerafast代理](#)
[kerafast细胞代购kerafast品牌代理](#)
[kerafast华北代理](#)
[美国kerafast公司](#)
[kerafast公司](#)
[进口kerafast代理](#)
[kerafast丁香通](#)
[kerafast中国代理](#)
[kerafast官网](#)
[kerafast抗体](#)
[kerafast专业代理](#)
一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求


报价要求详细描述

【如有请填写;若无留空即可】按10KG、25L大量采购的时候，是否可

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

手机扫描二维码阅读本页

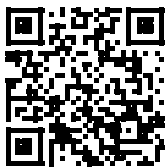

可能感兴趣的内容

[NR-19475土拉弗朗西斯菌亚种.土拉菌,菌株SCHUS4,Gateway?克隆集,在大肠杆菌中重组,板18\(克隆\)](#)

2022-04-01

[NR-3639甲型流感病毒,KilbourneF163:](#)

[A/Dunedin/6/1983\(HA,NA\)xA/PuertoRico/8/1934\(H1N1\),ReassortantX-81\(病毒\)](#)

2022-03-31

[NR-13634结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1106\(MT0951、Rv0924c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-46411金黄色葡萄球菌,HIP11983\(细菌\)](#)

2022-04-01

[核提取分离培养基,100ml\(100次反应\)](#)

2021-12-21

[人工模拟合成汗DN 53160-2/BS EN 1811 \(BZ125\) 500ml](#)

2021-12-13

[质谱法,抗氧化蛋白缓冲液,100UL](#)

2021-12-21

[NR-781牛痘病毒,单克隆抗牛痘\(WR\)A27L,残基1至110\(腹水\)\(类似于VMC-50\)\(单克隆抗体\)](#)

2022-03-31

[NR-46954金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌、JE2、转座子突变体NE411\(SAUSA300_2578\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[抗D\[Rho\]抗体,人73/517](#)

2024-05-19

[NR-41926肺炎克雷伯菌,BIDMC10\(细菌\)](#)

2022-04-01

[人肾素\[国际标准\]68/356](#)

2024-05-19

[道康宁PDMS184光学胶灌封胶聚二甲基硅氧烷 1.1KG](#)

2021-12-02

[NR-43499_霍氏博德特氏菌,41130\(细菌\)](#)

2022-04-01

[SARS-CoV-2XF重组分离株101058](#)

2024-05-19

[NR-47932金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0709\(NE1390\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[MRA-105冈比亚按蚊,M2,鸡蛋\(矢量\)](#)

2022-04-01

[牛疱疹病毒1型 \(BHV-1 / IBR\) MAb gB-gI IgG2b同种型](#)

2019-05-08

[鼠MET\(V1110i\)表达NIH3T3细胞系,1个小瓶](#)

2021-12-21

[2024 06 05 Mag](#)

2024-06-03